

Motor 2: calibracion de respuesta antes de ajustar reward

Proyecto Protesis Mioelectrica TD3

2026-06-04

1 Resumen

Se reviso una fase corta de diagnostico para motor 2 antes de volver a entrenar campanas largas o retomar Residual Lift y stop-band. El objetivo fue separar donde aparece el bajo flujo util del motor 2: en el simulador de encoder, en `encoder2Flex`, o en `flexJoined_scale`.

El trabajo siguio siendo solo software/simulacion. No se activo hardware, no se cambiaron puertos COM y no se promovio ninguna configuracion nueva como default.

2 Por que se hizo

La fase anterior mostro que la reward ponderada en motor 2 redujo `trackingMSE_motor2`, pero no aumento `responseRange_motor2` ni redujo de forma robusta los flags `motor2_flat_response` y `motor2_action_no_mot`. Por eso se aislo primero la respuesta del simulador y la conversion encoder-flex.

La pregunta principal fue directa: si el encoder se mueve pero el flex normalizado no cambia, entonces el problema no esta solamente en la accion del agente.

3 Diagnostico encoder a flex

Se ejecuto:

```
results = run_motor_response_conversion_diagnostic();
```

La prueba aplico niveles [-1 -0.75 -0.50 -0.25 0 0.25 0.50 0.75 1] por motor. En motor 2 se observo que niveles bajos si mueven encoder, pero no producen flex util hasta cruzar la zona efectiva de `encoder2Flex`.

Table 1: Motor 2: conversion encoder-flex desde home.

Accion	PWM	Encoder range	encoder2Flex	Flex norm	Etapas
-1.00	-255	437.333	0.000	0.000	encoder2Flex flat
-0.25	-64	15.000	0.000	0.000	encoder2Flex flat
0.25	64	3598.000	0.000	0.000	encoder2Flex flat
0.50	128	6113.833	359.688	0.175801	responsive
1.00	255	6665.167	440.176	0.215140	responsive

La lectura es que el aplanamiento bajo no ocurre en el encoder del simulador. Ocurre despues, en la conversion `encoder2Flex`, por la zona de gap/limites. En motor 2, una accion de 0.25 mueve el encoder 3598, pero deja `encoder2FlexRange=0`.

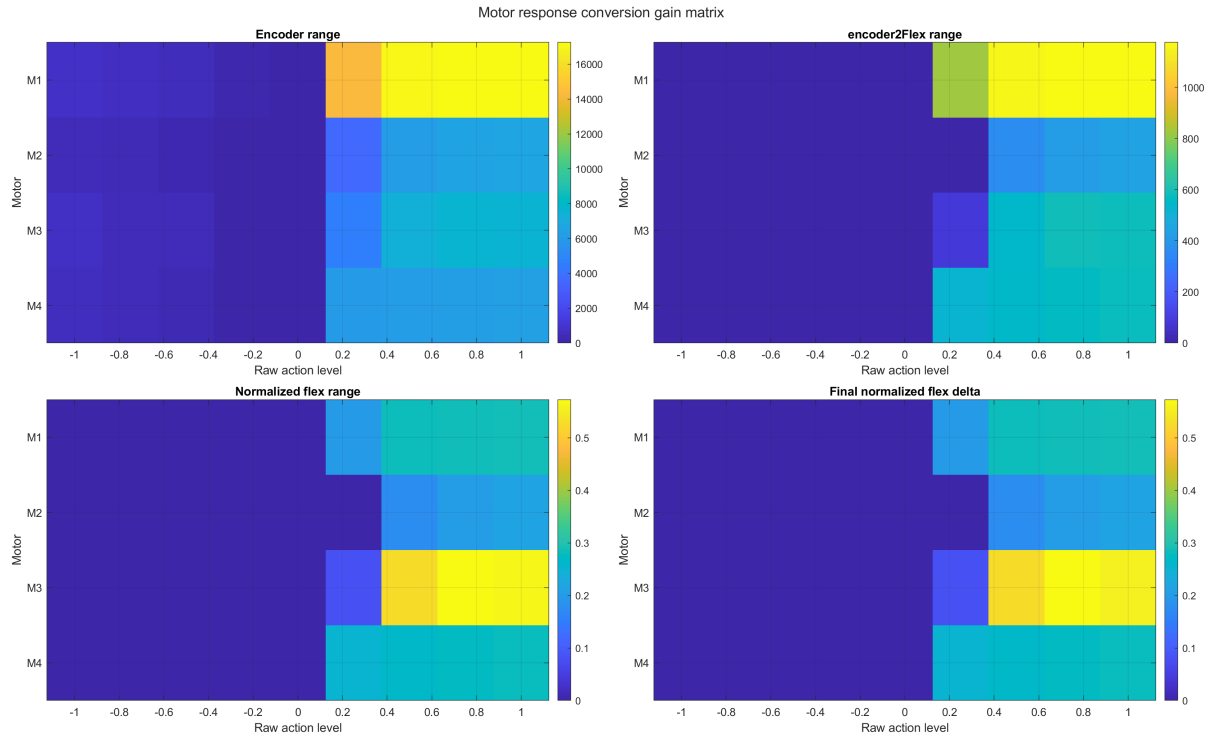


Figure 1: Matriz MATLAB de rangos encoder, encoder2Flex y flex normalizado.

4 Sanity con posiciones iniciales

Se ejecuto:

```
results = run_motor2_simulation_sanity_check_extended(struct( ...
    'initialMode','all'));
```

El objetivo fue no concluir que la accion negativa falla cuando la posicion inicial ya esta abierta. Se probaron tres modos: `home`, `mid` y `closed`.

Table 2: Motor 2: rango flex promedio por modo inicial.

Modo inicial	Positive mean range flex	Negative mean range flex
home	0.148948	0.000000
mid	0.131110	0.280059
closed	0.411169	0.560117

La accion negativa desde `home` no fue concluyente. Desde `mid` y `closed`, motor 2 si mostro rango flex util con acciones negativas. Esto indica que la asimetria observada depende mucho de la posicion inicial y de la zona util de conversion.

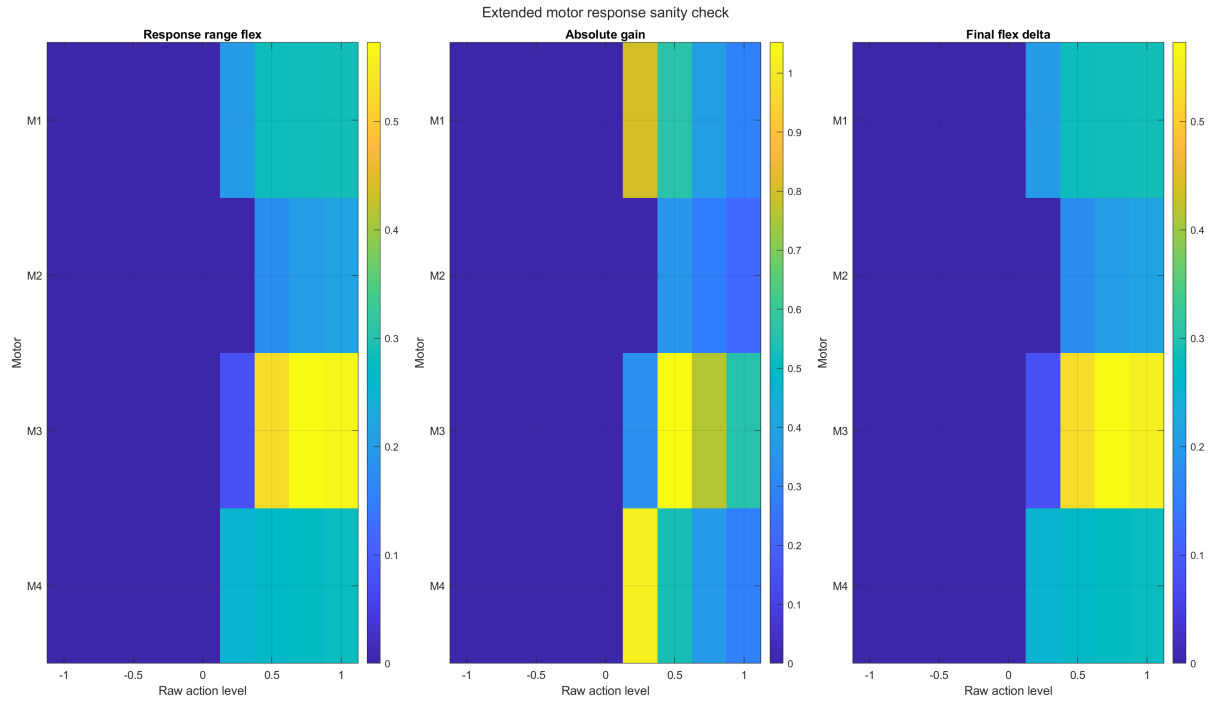


Figure 2: Sanity MATLAB desde home.

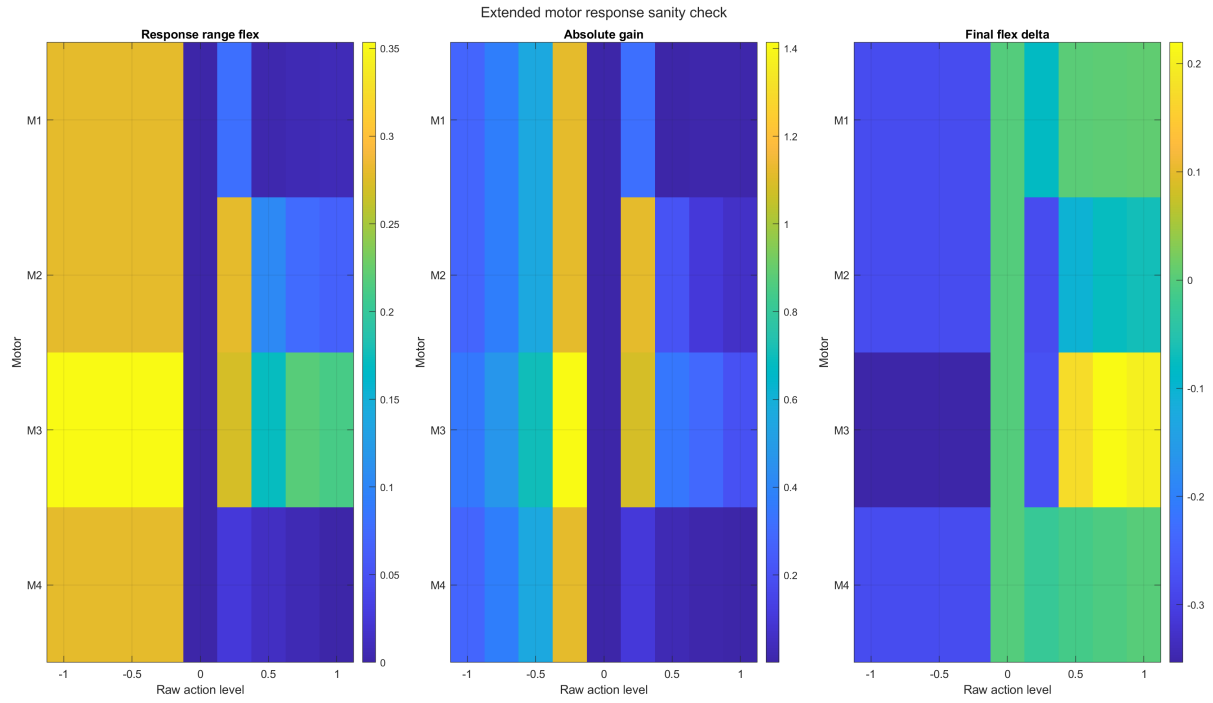


Figure 3: Sanity MATLAB desde posicion media.

5 Ablation de accion calibrada

Se ejecuto una prueba corta:

```

results = run_motor2_calibrated_action_ablation(struct( ...
    'seeds', [11 55], ...
    'trainingEpisodes', 500, ...
    'finalTestEpisodes', 5, ...
    'useGpu', true));

```

Se compararon tres configuraciones: baseline cuantizado, accion continua y `motorCalibratedQuantized`. La calibrada uso niveles mas altos para motor 2 en simulacion, sin cambiar el default oficial.

Table 3: Ablation corta, promedio de seeds 11 y 55.

Config	MSE	MAE	MSE M2	Range M2	Saturacion	Flags M2
baseline	0.099748	0.257544	0.112913	0.170200	0.169857	1 flat, 0 no-motion
continua	0.095778	0.254492	0.089930	0.138397	0.145979	1 flat, 0 no-motion
calibrada	0.092527	0.252928	0.070589	0.167690	0.053934	1 flat, 1 no-motion

La accion calibrada mejoro el error global, bajo el error de motor 2 y redujo bastante la saturacion. Sin embargo, no aumento el rango util promedio de motor 2 frente al baseline y dejo un flag `motor2_action_no_motion`. Por eso no paso el criterio de aceptacion.

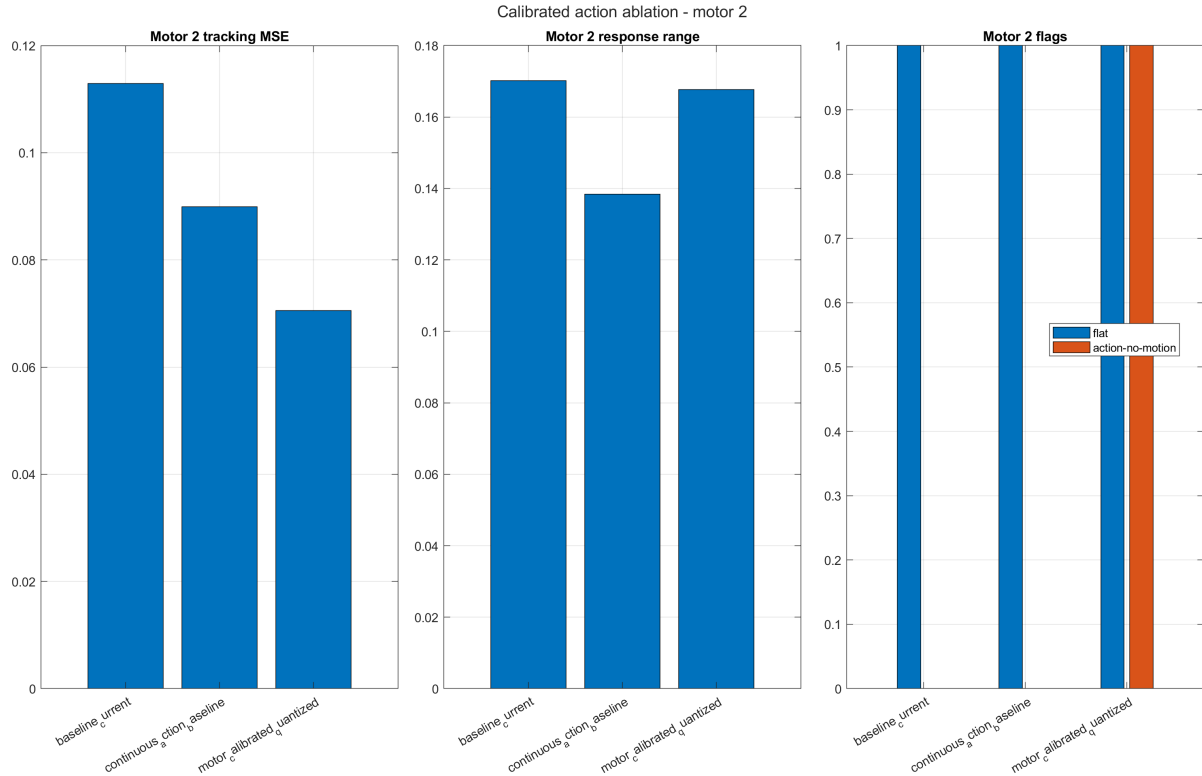


Figure 4: Resumen MATLAB de motor 2 en la ablation calibrada.

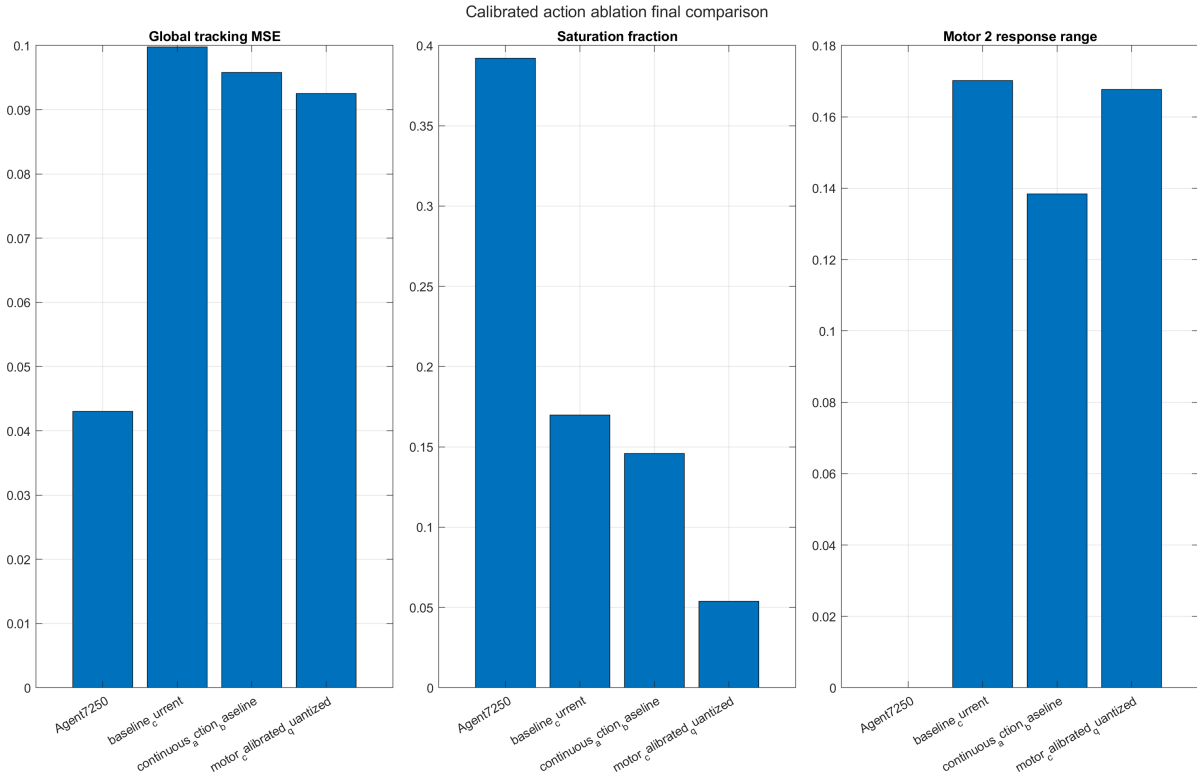


Figure 5: Comparacion final MATLAB de la ablation calibrada.

6 Intento de conversion encoder2Flex

Despues se probó una correccion experimental en `encoder2Flex` para motor 2. No se cambio el default oficial. La prueba aceptada uso `baselineQuantized`, `encoder2FlexVariant="motor2Calibrated"` y `motor2Encoder2FlexGapOffset=-256`. La seleccion final uso `selectionMode="motor2_final_gate"` para probar varios checkpoints antes de aceptar una seed.

La corrida corta quedo en:

Agentes/motor2_conversion_fix_ablation/26-06-18_02-49-24/

Table 4: Ablation de conversion, seeds 11 y 55, 500 episodios.

Config	MSE	MSE M2	Range M2	Saturacion	Flat	No-motion	Aceptada
baseline + baseline	0.099748	0.112913	0.170200	0.169857	1	0	no
baseline + motor2Cal	0.092616	0.078885	0.181432	0.133639	0	0	si
accion cal + baseline	0.092527	0.070589	0.167690	0.053934	1	1	no
accion cal + motor2Cal	0.075777	0.078055	0.172212	0.108406	1	1	no

La mejora aceptada fue `baselineQuantized + motor2Calibrated`. Frente al baseline, bajo el MSE global, bajo el MSE de motor 2, subio `responseRange_motor2` y dejo los flags de motor 2 en cero para este smoke. La accion calibrada no se promovio porque siguio dejando flags.

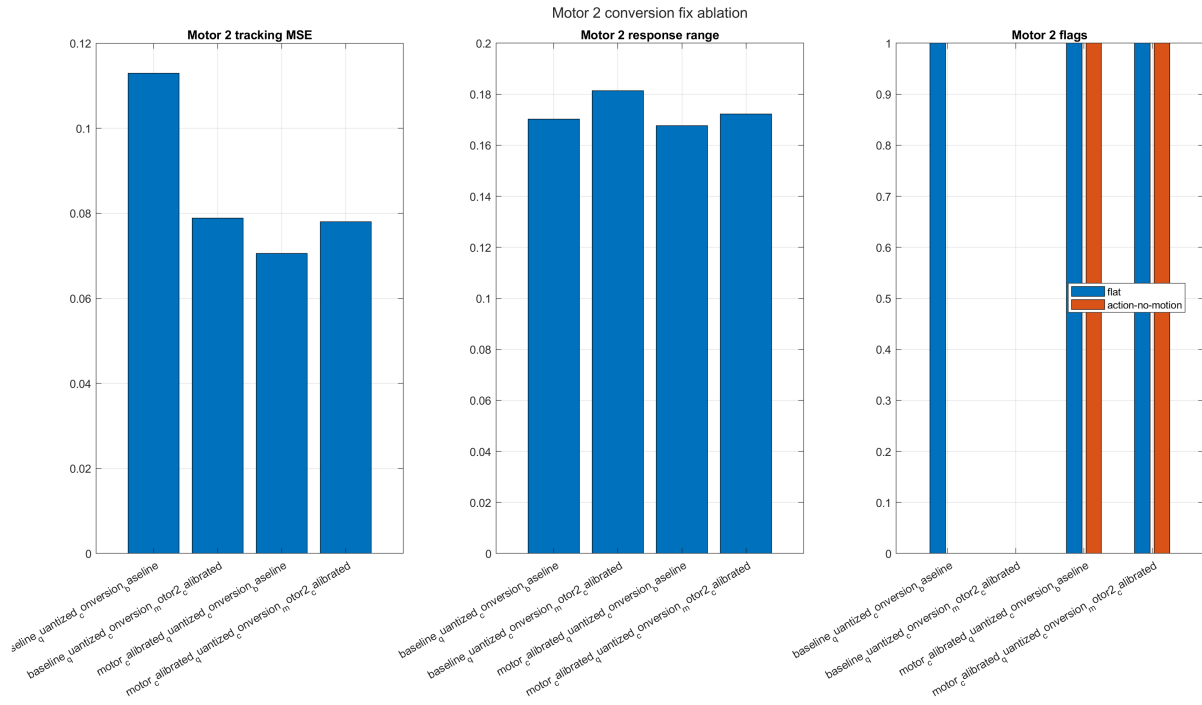


Figure 6: Resumen MATLAB de motor 2 con conversion calibrada.

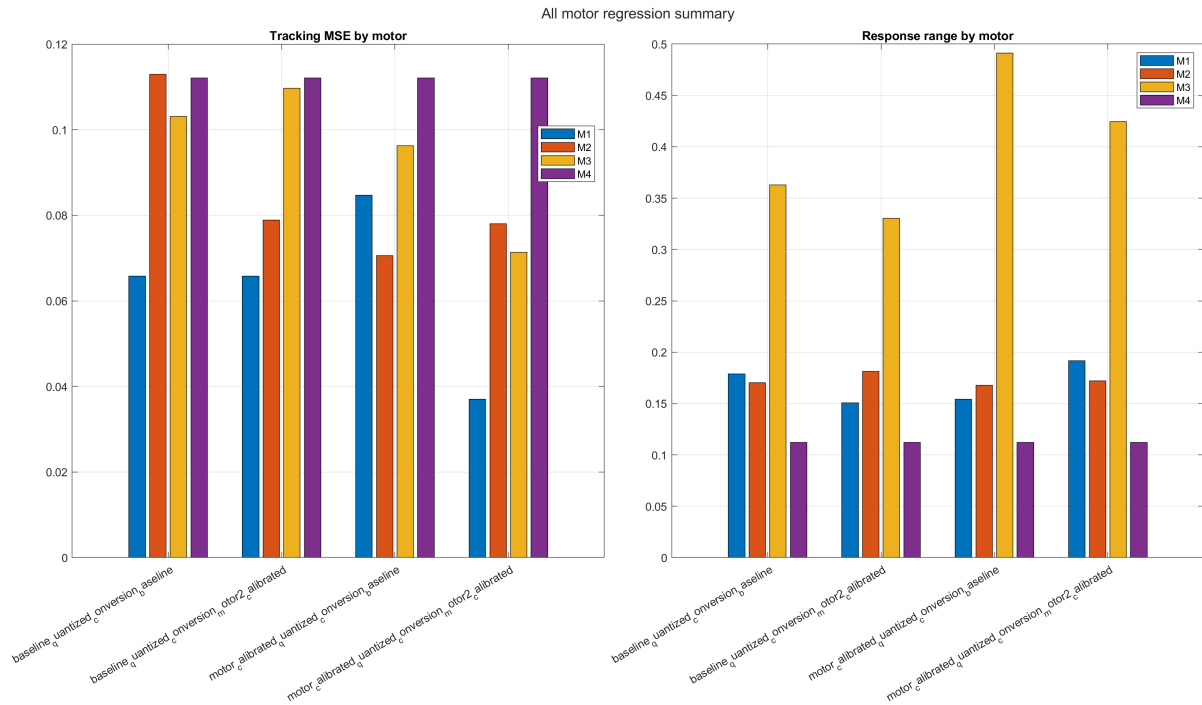


Figure 7: Revision MATLAB de todos los motores en la ablation de conversion.

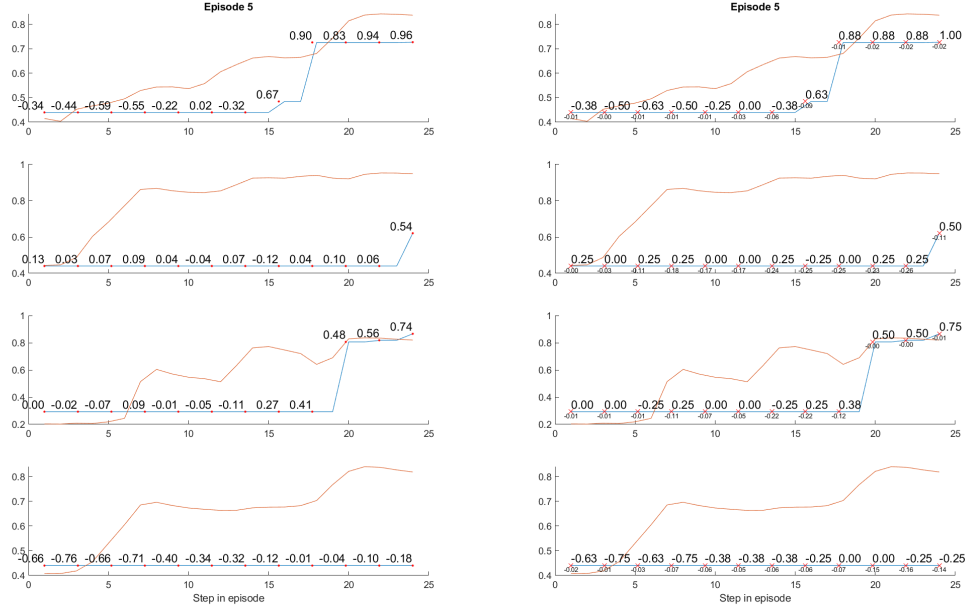


Figure 8: Test visual MATLAB, seed 55, conversion aceptada, episodio 5.

7 Evidencia visual de entrenamiento y test

Las figuras siguientes fueron generadas por MATLAB durante el entrenamiento y test del checkpoint seleccionado para `motorCalibratedQuantized`.

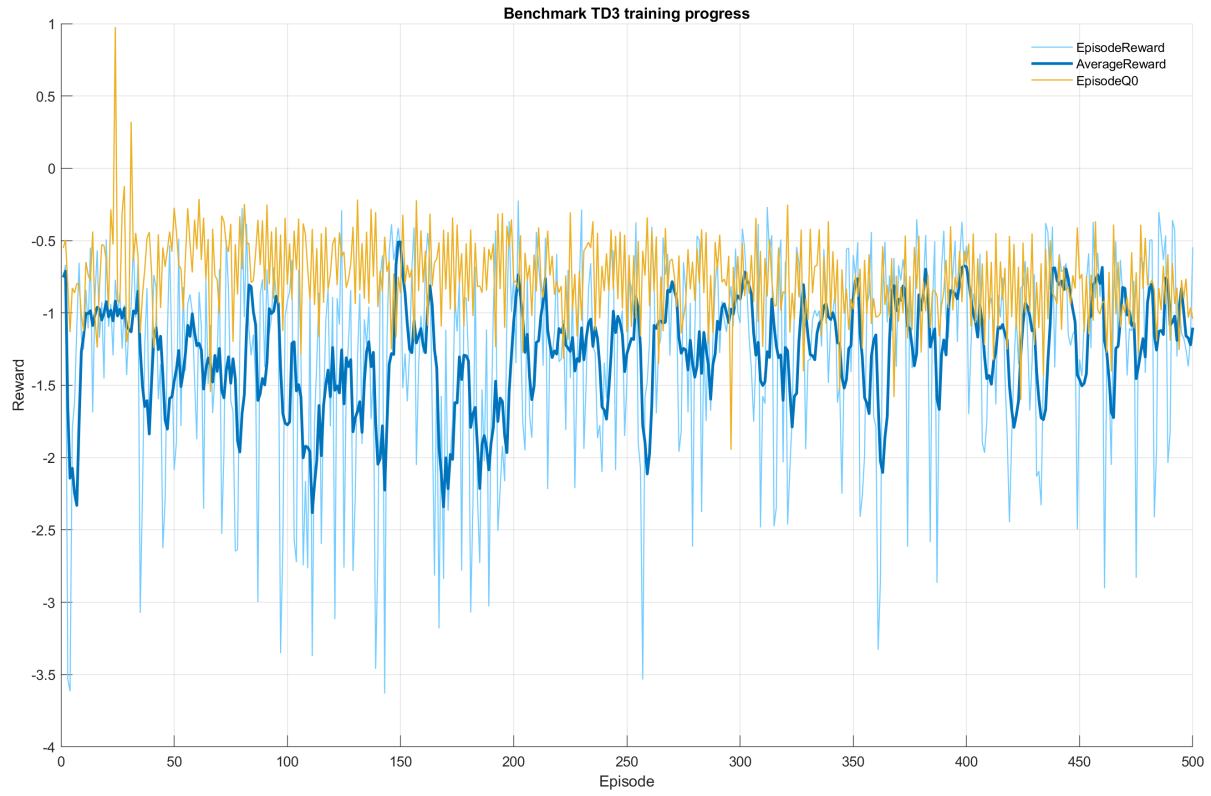


Figure 9: Training progress MATLAB, seed 11, accion calibrada.

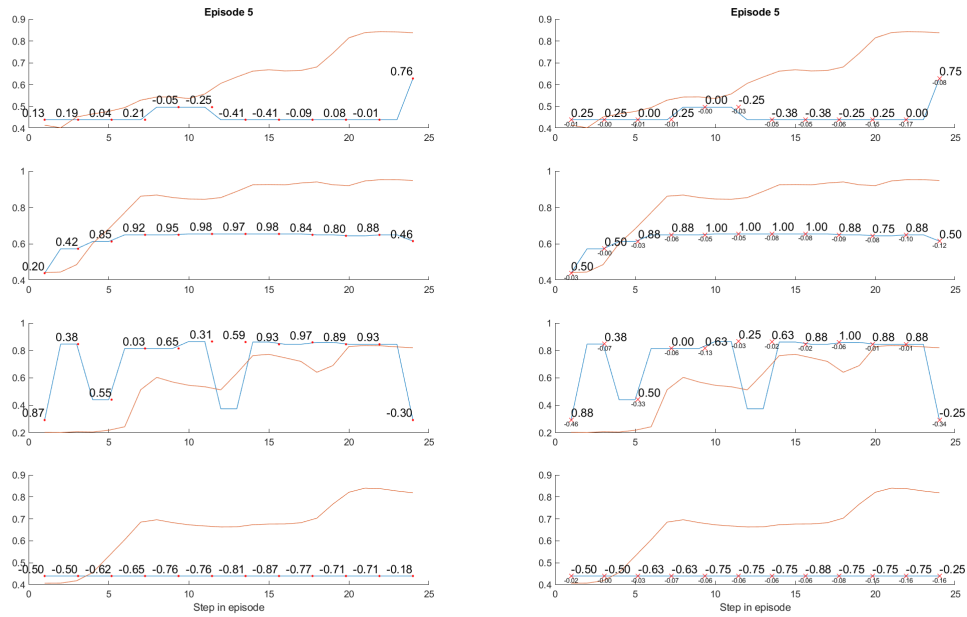


Figure 10: Test visual MATLAB, seed 11, episodio 5, accion calibrada.

8 Conclusion

Se concluye de forma provisional que el problema del motor 2 no es un simple indice incorrecto. El encoder responde, pero niveles bajos quedan aplanados en `encoder2Flex`. La accion calibrada ayuda al error y a la saturacion, pero no resolvió los flags. La variante experimental `motor2Calibrated` con `gapOffset=-256` si paso el smoke corto cuando se uso junto con `baselineQuantized`.

Antes de volver a reward, Residual Lift o stop-band, conviene revisar `gap.idx`, `breakLimit.idx`, `encoder2Flex` y la dinamica del simulador para posiciones `mid` y `closed`. La conversion calibrada debe seguir marcada como experimental y solo de simulacion. No se debe lanzar una campana larga hasta validar mas seeds y mas episodios de test.